

Why? Biogel®

世界でバイオジェルが選ばれる理由

安全性

高品質

高フィット性



最高レベルの安全性を実現する究極の歯科用手袋

●豊富な7サイズ

左右専用→高フィット性

●長時間使用可能

吸湿ポリマーコーティング→快適


●グリップ力UP

操作性、安全性が向上

●安全性

感染防護率UP

歯科医療従事者へのC型肝炎や
HIVなどの感染のリスクから
あなたとスタッフを防護します。

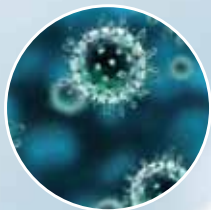

装着性

Biogel シリーズは、内側をコーティングしているポリマーにより、乾燥した状態であっても、湿った状態であっても容易に装着する事が可能です。

フィット性と触感

多くの手袋は左右どちらにも使えるためぴったりと合うサイズを見つけるのは難しいデザインになっています。

Biogel Dental グローブでは7種類ものサイズを取り揃えており、指の垂れや出っ張りを防ぐことができ、触感もそれによって高まります。

さらに、Biogel シリーズは吸湿性ポリマーコーティングにより発汗を吸湿し、長時間の装着も快適です。

グリップ

歯科用機器を取り扱うにあたって、手袋のグリップ性は作業をする上でとても重要なポイントです。

Biogel Dental グローブは洗浄してもグリップを失わず、安価なパウダー付き手袋と異なり ベトベトした状態になりません。

操作性

一般用ラテックス手袋は、手袋の表面上に存在する高レベルの残留促進剤がまれにシリコン印象材料の硬化をさまたげることがあります。

Biogel Dental グローブはごくわずかな残留化学薬品しか含有していないため、材料の硬化を妨げません。

また、リーマー操作などの際に、巻き込まれにくく安心です。

Biogelは、ピンホールに対するAQL*が0.65という安全性に優れた、業界をリードする手術用手袋です。
AQLの業界標準は1.5で、この数値が低いほど、ピンホール数は少なくなり、グローブの品質は高くなります。

*AQLは、Acceptable Quality Level または Acceptance Quality Limit の略で、1999年に制定された日本工業規格 JIS Z 9015 に準拠した合格品質水準です。

バイोजェル デンタル サイズ一覧




届出番号: 13B1X10015SC0001
厚さ(指先): 0.28mm
1箱: 25双入り

※ 汎用性を有し、全ての臨床的な歯科検診に推奨されます。

サイズ	商品番号
5.5	9930255
6.0	30260
6.5	30265
7.0	30270
7.5	30275
8.0	30280
8.5	30285

その他のバイोजェル -手術用-

材 質	天然ゴムラテックス		合成ゴム	
	ラテックスシングルグローブ		ラテックスダブルグローブ	ポリクロロブレン
製品名	Biogel® Surgeons バイोजェル サージオンズ	Biogel® Sensor バイोजェル センサー	Biogel® Indicator® Underglove バイोजェル インディケーター アンダーグローブ	Biogel® Skinsense® バイोजェル スキンセンス
				
製品番号	304	306	312	509
厚さ(指先)	0.27mm-0.28mm	0.23mm	0.22mm-0.23mm	0.21mm
グリップ		✓		
感 度		✓		
汎用性	✓			✓
二重装着			✓	

販売名	医療機器認証番号
バイोजェル	222ADBZX00017000
バイोजェル M	222ADBZX00018000
バイोजェル センサー	222ADBZX00019000
バイोजェル スーパーセンシティブ	222ADBZX00081000
バイोजェル インディケーターアンダーグローブ	222ADBZX00020000

販売名	医療機器認証番号
バイोजェル スキンセンス	220ADBZX00134000
バイोजェル スキンセンスPI	222ADBZX00082000
バイोजェル PI インディケーター アンダーグローブ	222ADBZX00083000
バイोजェル ネオダーム	224ADBZX00108000

製造販売元



メンリッケヘルスケア株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-20-7
Tel: 03-6914-5006 Fax: 03-5909-1142
www.molnlycke.com