




All-in-One Milling Machine

CRAFT 5X

オールインワンミリングマシーン

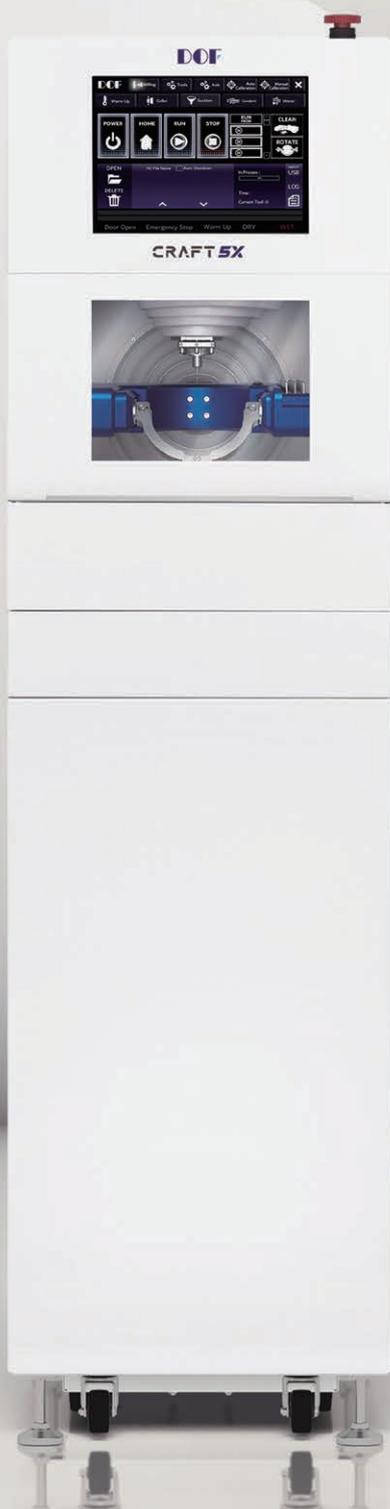

チタンラウン
加工可能！



全てを一つに！

加工機+集塵機・クーラント・コンプレッサーをAll-in-One Milling Machine

Futures

01. Wet & Dry



ジルコニア、WAX、PMMA、CAD/CAM冠だけではなく、ガラスセラミックやプレミルドアバットメントなどの加工も可能です。

02. 5-Axis



同時5軸加工機であるため、補綴物形状の制約をより少なくした精密加工を実現しました。アンダーカットの激しいケースや挿入角度が多様なケースにもその効果を発揮します。

03. 90 Degree Milling



90度加工で歯牙の外形をより高精度に再現することができます。歯間や歯牙のテクスチャー、歯肉ラインや前歯部加工時にその有用性があります。

04. One Step Milling



5軸リバース加工方式により、アバットメントと上部構造を同時に製作することでワンステップ加工が可能となりました。

05. Quiet & Space-saving




作動時の音が小さい静音設計。設置にはW436×D660mmの省スペースでOK。静かで設置しやすいため、歯科技工所だけでなく、歯科医院での導入もおすすめします。

06. High Quality Spindle



最大100,000rpmで最大出力0.7kWの優れた耐久性をもつJägerスピンドルを搭載しています。

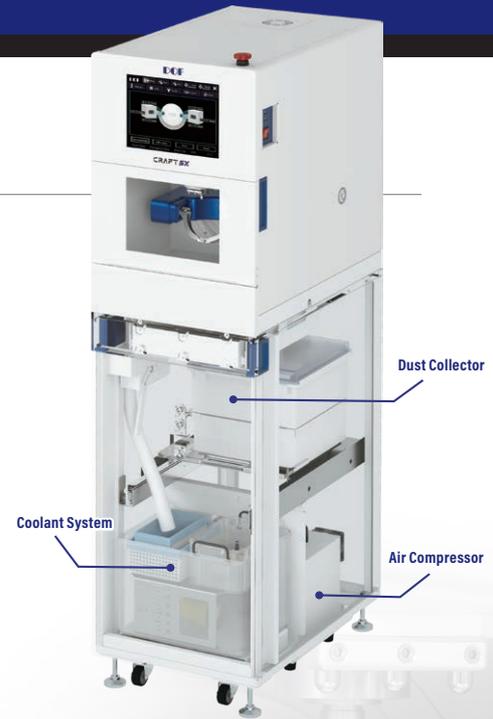

対応加工材料

ジルコニア、ワックス、PMMA、PEEK、コンポジットレジン、ハイブリッドレジン、ガラスセラミック、プレミルドチタンアバットメント
 ※一部テンプレート作成が必要な場合がございますので、事前にお問い合わせください。
 ※コバルトクロム合金には対応していません。



DOF SOLID
high precision dental mill

Product

ミリングマシン

CRAFT 5X



[仕様]

サイズ	加工機(上部)	W440×D660×H710mm
	テーブル(下部)	W436×D660×H1000mm
重量	加工機(上部)	75kg
	テーブル(下部)	70kg
スピンドル	シャンク	4φ
	最大回転速度	100,000 rpm
	最大出力	0.7kW
ツールポケット数		21個
プレミルドアバットメント最大装着数		10個
プレミルドアバットメント(ワンステップ加工時)最大装着数		6個
ガラスセラミック最大装着数		6個
CAD/CAM冠最大装着数		12個
必要電力		1.5kW

価格 **6,000,000円**

※CAMソフト・ミリングバー各種・設置費用・保守費用は別途となります。

一般的名称: 歯科技工室設置型コンピューター支援設計・製造ユニット
 医療機器分類: 一般医療機器
 一般医療機器届出番号: 26B2X10038000012

製品についての詳細は
 弊社ホームページを
 ご覧ください▶



<https://www.dentalsupply.co.jp/>

※価格は希望小売価格です(価格には消費税は含まれておりません)。※本製品の仕様は予告なく変更することがあります。※印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。

ジーシーグループ



[販売元]

株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
 大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
 北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
 九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

[製造販売元]

株式会社DOF JAPAN

ご用命は