
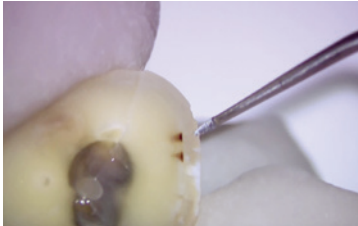


秋山勝彦先生ご考案

AKIYAMA's インストゥルメント



AKIYAMA's マイクロエキスカベーター

露髄付近のカリエス除去において、咬頭頂から5~6mm付近は露髄の可能性が高くなると言われている。AKIYAMA's マイクロエキスカは先端から5mmにラインが入っており、カリエス治療時に常に露髄のリスクに対して術者がわかる様に工夫されている。また、AKIYAMA's マイクロエキスカ0.5、0.7、1.0、1.2mmはAKIYAMA's マイクロバーと同規格であり、最小限の侵襲で治療を行うことができる。

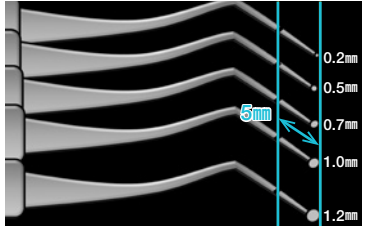

0.2mmのエキスカはマイクロクラックのカリエス除去が行える

カリエスが見えた場合露髄させる確立が高くなる。特に深い齲窩をラウンドバーで削合するのは非常に危険である。

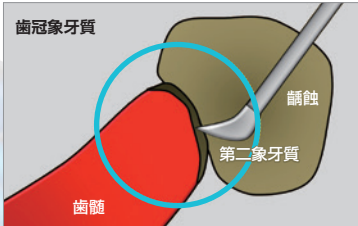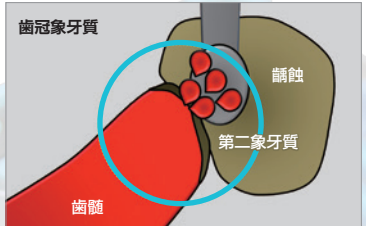

深い齲窩を回転器具(ラウンドバー)で除去するのは非常に危険である。


深い齲窩は、手用切削器具を応用すると露髄の確立が大きく下がる。



バーとエキスカベーターの径が同調していないと非効率的で侵襲が大きくなる。



滅菌ケース

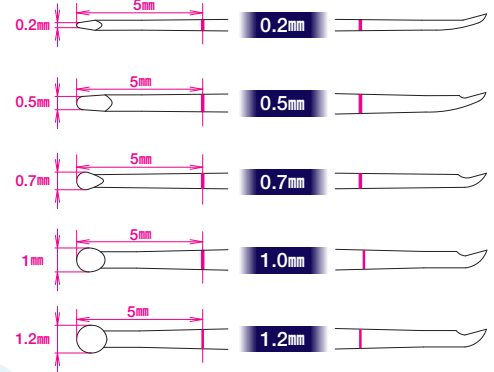

【価格】●0.2/0.5/0.7/1.0/1.2mm 各12,500円 ●滅菌ケース 16,000円

先端は細く繊細な為、お取り扱いには十分ご注意ください

一般的名称：歯科用エキスカベーター
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：11B1X100062D311

メリーダイヤ

一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B3X00256000001




AKIYAMA's Micro Bur セット



咬頭頂からの深さを確認するため1mm刻みでラインが入っている。0.5、0.7、1.0、1.2mmはマイクロエキスカとサイズを合わせている。

【価格】●KA-005ff 5本入 12,500円 ●KA-012f 5本入 12,500円
●KA-007f 5本入 12,500円 ●AKIYAMA's Micro Bur セット
●KA-008f 5本入 12,500円 (アソート5本スタンド付) 17,500円
●KA-010f 5本入 12,500円

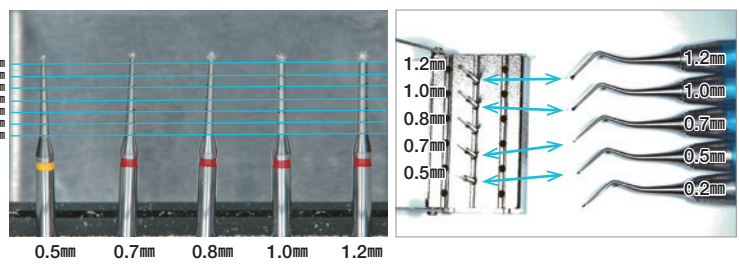


AKIYAMA's マイクロジンパッカー

AKIYAMA's マイクロジンパッカーは、圧排糸を歯肉溝内に挿入する時に使用されるインストルメントである。実際の歯肉溝の幅に合わせて制作されており、また圧排糸が滑らないように先端に加工が加えられているので非常に効率的で短時間に圧排糸を歯肉溝内に挿入できる。

【価格】●1本 12,500円

先端は細く繊細な為、お取り扱いには十分ご注意ください

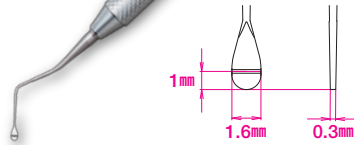

圧排糸を歯肉溝内に挿入する時に、健康な歯周組織を破壊しない様に1mmの所にマーキングがされていて、圧排糸挿入時の目安になる。


一般的名称: 歯科用圧入充填器
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 11B1X1000665D702

AKIYAMA's マイクロミラー

特許出願中

幅0.7mm・1.5mmのミラーを歯間部に入れて、手術用顕微鏡の強拡大で直接隣接面コンタクト付近を観察・診断するテクニックThe Micro Window Shopping Technique Akiyama Methodのために開発されたミラーである。


ミラーは片面のみとなっております

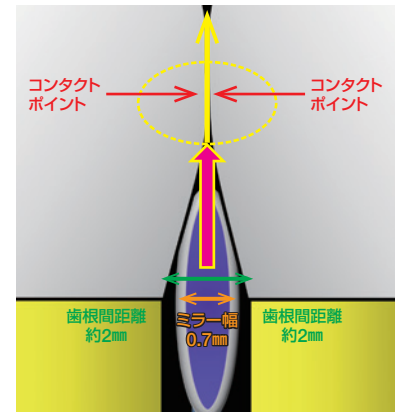

歯根側より歯冠側に位置する隣接面を、極端に幅の狭いミラー(0.7mm・1.5mm)と手術用顕微鏡を応用して直接観察すると、ほとんどアンダーカットが存在しないため隣接面のほとんどを観察する事ができる可能性が高い。


Ultra Small 1.5mm前歯部用

【価格】●1本 17,500円

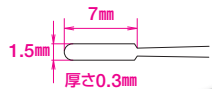

Ultra Small 1.5mm臼歯部用


【価格】●1本 17,500円

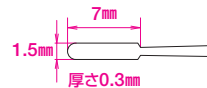

Extra Ultra Small 0.7mm 1

ハンドルを手前にして先端が上を向いたとき、ミラー面は斜め(15°)右側になります。


【価格】●1本 13,500円

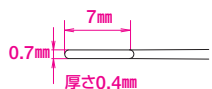

Extra Ultra Small 0.7mm 2

ハンドルを手前にして先端が上を向いたとき、ミラー面は斜め(15°)左側になります。

【価格】●1本 13,500円

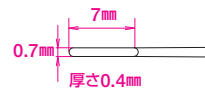

一般的名称: 歯鏡
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 09B2X00010G00073

解説・使用方法こちらから

秋山勝彦 顕微鏡 YouTube

検索

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.dentalsupply.co.jp/>



販売元

株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は