


オストロマット624 *oral design*

信頼のドイツ・デケマ社より、審美性に優れた陶材のために

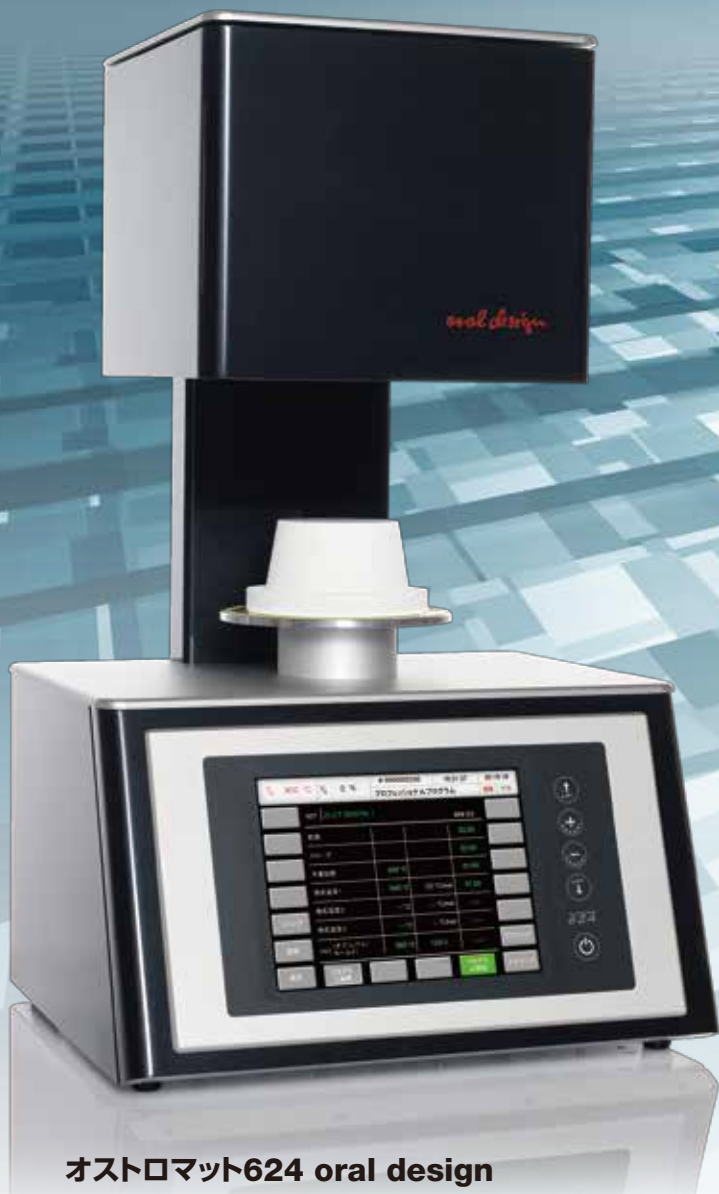

オストロマット624 oral design

包装：本体1台
 (バキュームポンプ1台、エアフィルター1個、焼成台1個、
 温度キャリブレーションキット1個、ピンセット1本)

価格 1,825,000円

一般的名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉
 医療機器分類：一般医療機器
 届出番号：13B2X10104190312

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

独自のストーンを採用

マッフルと焼成台は特殊なストーンを掘り出したもので、保温効率に優れた特殊なストーンを採用しており、十分な熱量を確保し陶材の緻密な焼き上がりが可能です。

オートドライシステム

焼成前の乾燥から焼成後の冷却まで、マッフル内の温度と焼成台の距離を計算し焼成台上の補綴物の温度を正確にコントロールします。

USBインターフェース

USBメモリーへの焼成プログラムの保存、読み込みが可能です。またデケマ社のホームページから各種陶材の最新プログラムがダウンロードできます。クリエイション陶材のプログラムはインストールされています。

▶ <http://www.dekema.com/>

タッチパネル式カラーディスプレイ

7.5型のカラーディスプレイにより、プログラム設定や入力操作がタッチパネルで簡単に行えます。



仕様

最高焼成温度	1200℃
プログラム数	200
インターフェース	USBx2、LANx1
プログラムモード	イージーモード / クラシックモード / プロフェッショナルモード
本体サイズ	383×343×653mm (幅×奥行×高さ)
本体重量	18.0kg
電源	100V (50Hz/60Hz)
消費電力	1450W

製品についての詳細は
 弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.dentalsupply.co.jp/>



ジーシーグループ 製造販売元

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
 大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
 北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
 九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288



ご用命は