

## ガリレアンルーペマルチ

### セット

ガリレアンルーペマルチセットII 2.5倍 3.0倍 価格 44,000円

「ガリレアンルーペマルチ」と「デンタルLEDヘッドライトII」のセットです。



一般的名称：双眼ルーペ 医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104100316

### 単品

ガリレアンルーペマルチ 2.5倍 3.0倍 価格 28,000円

- 【構成】
- マルチ用フレーム本体(シルバー/Red/Pink)
  - フレームバンド
  - ラバーバンド
  - レンズキャップ2個
  - フリップハンドル1個
  - 清掃布1枚
  - ドライバー1本
  - ルーペ袋
  - 専用ケース



一般的名称：双眼ルーペ 医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104100286

## ガリレアンルーペマルチ TTLタイプ

### セット

ガリレアンルーペマルチ TTLタイプセットII 2.5倍 3.0倍 価格 55,000円

ガリレアンルーペマルチTTLタイプとデンタルLEDヘッドライトIIのセットです。



一般的名称：双眼ルーペ 医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104100317

### 単品

ガリレアンルーペマルチ TTLタイプ 2.5倍 3.0倍 価格 39,000円



- 【構成】
- TTL用フレーム本体(シルバー/Red/Pink)
  - プロテクトアイグラス(L,R,S,SS)
  - フレームバンド ● ラバーバンド ● レンズキャップ
  - ルーペ袋 ● 清掃布 ● 専用ケース

一般的名称：双眼ルーペ 医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104100298

## デンタルLEDヘッドライトII

デンタルLEDヘッドライトII マルチタイプ 価格 26,000円

軽量でコンパクトなバッテリーパックを採用し、ポケットにすっぽりと入ります。  
※バッテリーパックのメインスイッチの長押しで電源OFFが可能です。



一般的名称：汎用光源  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104100315

- 【構成】 ● ライト ● バッテリーパック ● ACアダプター ● バッテリーパック用ケース(ベルトホルダ付)  
● コードクリップ 4個 ● クリップオン ● 専用ケース ● 遮光ライトキャップ 1個

バッテリーパックサイズ	W66.5×D13×H82mm
充電時間	約6時間(フル充電)
使用時間	約5時間
バッテリー寿命	約300回充電
色温度	約6,000K
照度	40,000LUX以上
調光	8段階
重量	LEDライトコード 36g バッテリーパック 112g



クリップオンを使用すると  
保護メガネ等に直接装着が  
可能です。

デンタルLEDヘッドライトII TTLタイプ 価格 26,000円

クリップタイプのTTL専用LEDライトです。

一般的名称：汎用光源  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104100315



## 別売品価格表

製品名	価格
ガリレアンルーペマルチ用フレーム シルバー/Red/Pink	各7,200円
ガリレアンルーペマルチ用ラバーバンド	800円
ガリレアンルーペマルチ用プロテクトアイグラス(2枚)	800円
ガリレアンルーペマルチ用レンズ用フレーム	800円
ガリレアンルーペマルチ用ジョイントフレーム(2個) シルバー/Red/Pink	各800円
ガリレアンルーペマルチ用ノーズパッド	200円
ガリレアンルーペマルチ用ブラックスポンジ	200円
ガリレアンルーペTTL用フレーム シルバー/Red/Pink	各4,500円
ガリレアンルーペTTL用プロテクトアイグラス L,R,S,SS(2枚)	各1,200円
ガリレアンルーペ用レンズキャップ(2個) 2.5倍/3.0倍	各2,000円
ガリレアンルーペ用フレームバンド	800円
ガリレアンルーペ用アップハンドル	800円
ガリレアンルーペ用遮光レンズキャップ(2個) 2.5倍/3.0倍	各2,000円
ガリレアンルーペマルチ用コードクリップ(4個)	500円
デンタルLEDヘッドライトS/IIコード付のみ	10,000円
デンタルLEDヘッドライトII バッテリーパック	12,000円
デンタルLEDヘッドライトII用ACアダプター	1,500円
デンタルLEDヘッドライトII用遮光ライトキャップ	1,000円
クリップオン	1,000円

製品についての詳細は  
弊社ホームページをご覧ください▶  
http://www.dentalsupply.co.jp/



※消耗品は保証の対象外となります。 ※価格は希望小売価格です(価格には消費税は含まれておりません)。 ※本製品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。

ジーシーグループ [製造販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は

双眼ルーペ

# Galilean Loupes Multi

ガリレアンルーペマルチ

Galilean Loupes Multi

Galilean Loupes Multi TTL Type




進化を続ける  
ガリレアンルーペ

歯科医師の高精度な根管治療、窩洞形成に  
歯科技工士の精密なテクニシャンワークに  
歯科衛生士の精確なスケーリング、PMTCに



新色  
Pink



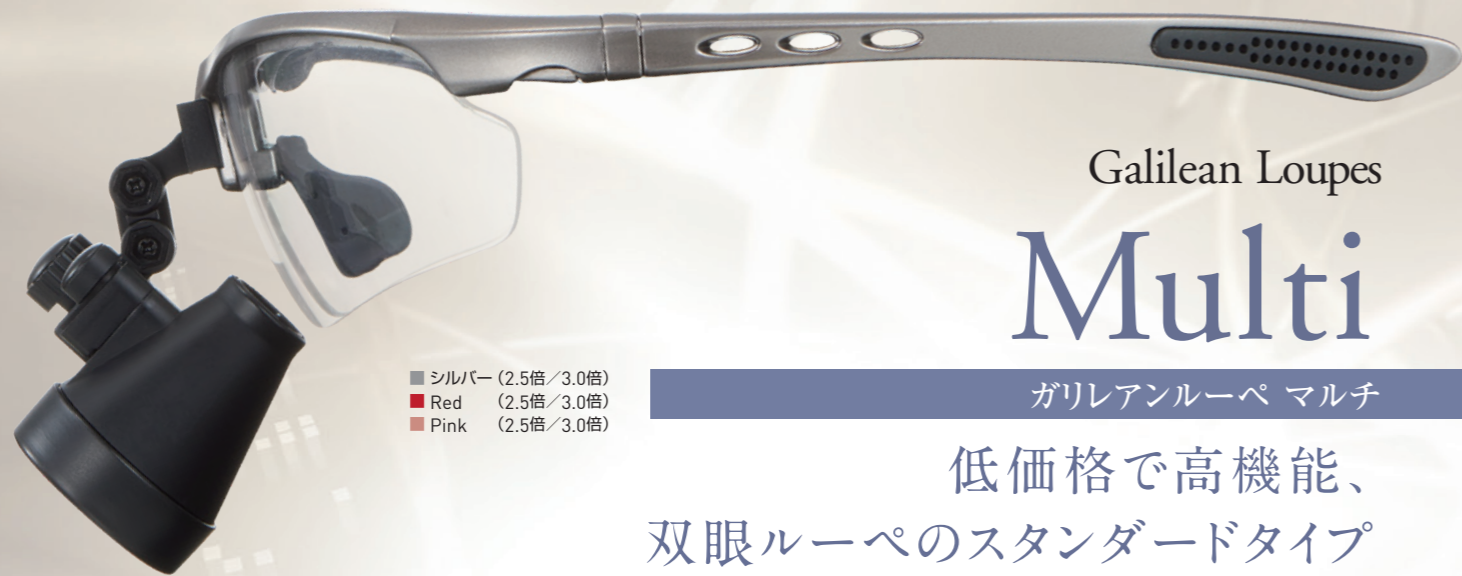

# Galilean Loupes Multi

ガリレアンルーペ マルチ

- シルバー (2.5倍/3.0倍)
- Red (2.5倍/3.0倍)
- Pink (2.5倍/3.0倍)

低価格で高性能、  
双眼ルーペのスタンダードタイプ



# Galilean Loupes Multi TTL Type

ガリレアンルーペ マルチ TTLタイプ

- シルバー (2.5倍/3.0倍)
- Red (2.5倍/3.0倍)
- Pink (2.5倍/3.0倍)

プロテクトアイグラスに  
Through The Lens  
レンズを直接装着したTTLタイプ

## メガネの上から装着可能

プロテクトアイグラスを外すことで、メガネをおかけの方でも装着が可能になります。また、メガネの形状に応じてノーズパッドを取り外して使用することもできます。



## 矯正レンズの取り付け可能

別売のレンズ用フレームに矯正レンズを取り付けてメガネ無しでルーペを使用することができます。

※矯正レンズの種類によっては、ご使用できない場合がございます。

【別売品】  
ガリレアンルーペマルチ用レンズ用フレーム  
価格：800円 ※TTLタイプにはご使用頂けません。



## 広い視野径が得られるTTLタイプ

TTLタイプは従来品と比べレンズと眼の距離が近くなるので、広い視野径が得られます。

〈イメージ図〉



## 選べる瞳孔間距離

L、R、S、SSの瞳孔間距離の異なる4サイズのプロテクトアイグラスがセットされており、術者に適したサイズをお選びいただけます。



〈瞳孔間距離〉


SS	56mm±1mm	R	60mm±1mm
S	58mm±1mm	L	64mm±1mm

〈ルーペ仕様〉 ※焦点距離は瞳孔間距離58mmの場合を示しています。

倍率	焦点距離	焦点深度	視野径
2.5倍	420mm	90mm	100mm
3.0倍	420mm	60mm	70mm

## フリップアップで 術野全体を確認

フリップハンドルにより、未使用時にはレンズをフリップアップしルーペを外さずに術野全体を見ることができます。

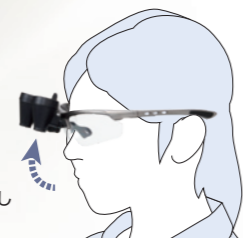



〈ルーペ仕様〉 ※焦点距離は瞳孔間距離58mmの場合を示しています。

倍率	焦点距離	焦点深度	視野範囲
2.5倍	420mm	90mm	75mm
3.0倍	420mm	80mm	60mm

## Features common to Galilean Loupes Multi & Galilean Loupes Multi TTL Type

### 緻密な治療が可能

- 2.5倍と3.0倍の倍率で、裸眼では見えづらい細部まで見えるようになります。
- 視野が拡大するので、診断力と治療行為における精度の向上が図れます。
- ルーペと眼の距離をできるだけ近くすることで、より広い視野を確認することができます。

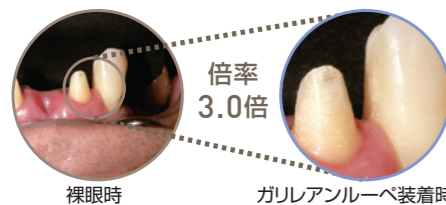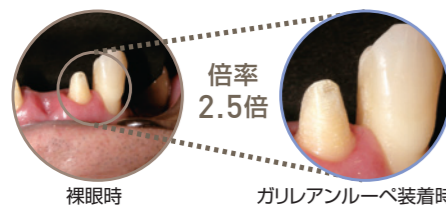

### 一定の作業距離により正しい姿勢を保つことが可能

- ガリレアンルーペを装着することで、安定した疲れにくい作業姿勢を保つことができます。
- 今まで悩んだ首・肩・腰の痛みや疲労感から解放されます。



### サポート力アップ

- フレームバンドからラバーバンドに変更することで、サポート力がアップし、より安定感が得られるため長時間の作業にも安心してご使用できます。
- ノーズパッドは鼻にフィットするように、フレキシブルに形を変えることができます。



フレームバンド

ラバーバンド

### LEDヘッドライトで口腔内を明るく照射

- 40,000Luxの「デンタルLEDヘッドライトII」を装着することで、口腔内を明るく照らし、作業効率を促進します。
- 瞳孔間距離によってはライトをルーペの間に装着することもできます。
- 「デンタルLEDヘッドライトII」は、専用のクリップオンを使用することで保護メガネなどにも装着することができます。



ライトはルーペの間にも装着可能。  
※ガリレアンルーペマルチ装着時

※ボギーズアイガード装着時  
※メガネの形状によって装着できない場合がございます。

ヘッドライトの電源はリチウムイオンを採用。  
1回(約6時間)の充電で約5時間の使用が可能です。

### 耐久性に優れたフレーム


- 衝撃に強いナイロン樹脂を採用し、耐久性に優れています。
- 軽量で弾力性があり、長時間作業の負担も軽減します。

### 感染予防対策

- 診療姿勢が良くなり、作業部位に顔を近づけすぎることなく作業ができるため飛沫による感染の予防対策としてご使用いただけます。

### 眼精疲労を軽減

- 人間工学に基づいた設計で、眼の疲労やストレスを緩和します。

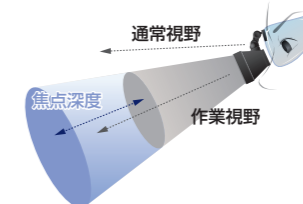

関連製品

弱酸性次亜塩素酸クリーナー  
JDSルーペ専用  
除菌クリーナー

価格:2,000円  
内容量:100cc



レンズくもり止め  
OTSアンチ-フォグ  
アルファ

価格:700円  
内容量:10g

