


# MicroMega Remover

## リムーバー


ガッタパーチャー除去

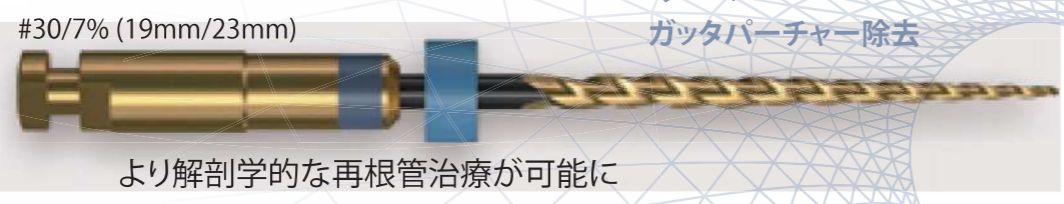


より解剖学的な再根管治療が可能に



- ポイント① 従来品GP除去ファイルより柔軟性と切削除去効率を向上させた熱処理NiTiワイヤーを使用
- ポイント② マイクロメガ ワンレシと同様、直径1mm MI-NiTiワイヤーを使用

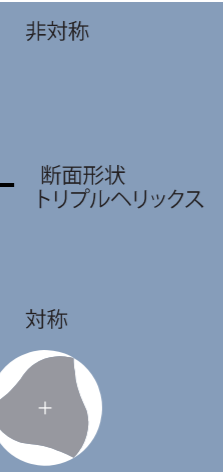

### マイクロメガ リムーバー プロトコル

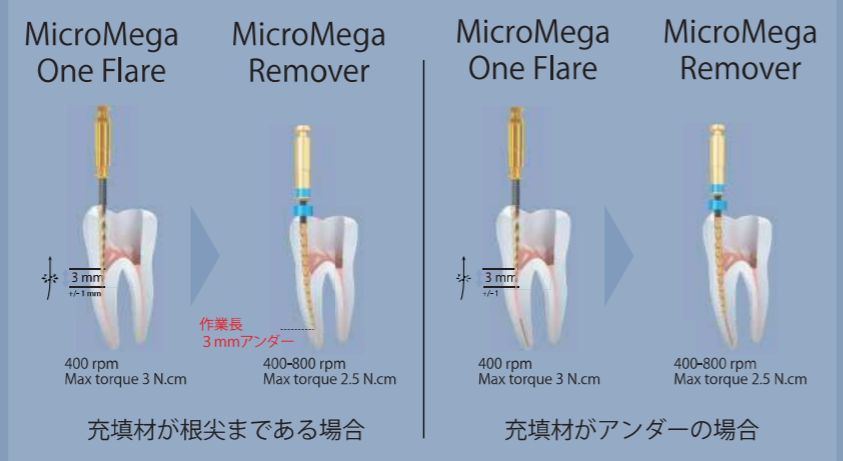

ガッタパーチャー除去後は、マイクロメガ ワンレシで残り3mmのガッタパーチャーを除去し、再度拡大形成を行ってください。

正回転：400-800 rpm  
トルク：2.5 N.cm  
単回使用

STERILE EO 滅菌済み

C-Wire 熱処理NiTiワイヤー使用

優れたクロス・セクション工程により

切削力と柔軟性を兼ね備えたガッタパーチャー除去ファイルを実現

## ORDER INFORMATION

製品名	長さ	径	色	本数	価格
マイクロメガ ワンレシ	21mm/25mm	#20/4%	黄	各5本	各9,000円
マイクロメガ ワンレシ	21mm/25mm	#25/4%	赤	各5本	各9,000円
マイクロメガ ワンレシ	21mm/25mm	#25/6%	赤	各5本	各9,000円
マイクロメガ ワンレシ	21mm/25mm	#35/4%	緑	各5本	各9,000円
マイクロメガ ワンレシ	21mm/25mm	#45/4%	白	各5本	各9,000円
マイクロメガ ワンレシ	21mm	アソート		5本	9,000円
マイクロメガ ワンレシ	25mm	アソート		5本	9,000円
マイクロメガ ワンフレア	17mm	#25/9%		5本	9,000円
マイクロメガ ワンジー	21mm/25mm	#14/3%		各5本	各9,000円
マイクロメガ リムーバー	19mm/23mm	#30/7%		各5本	各7,000円

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ [販売元]

### 株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

コルテンジャパン合同会社  
〒190-0012  
東京都立川市曙町2丁目25-1  
TEL: 042-595-6945  
FAX: 042-595-6946  
www.coltene.com

選任製造販売業者  
AJMD 株式会社  
〒103-0004  
東京都中央区東日本橋2-4-5  
真光ビルディング  
TEL: 03-5614-0733  
FAX: 03-5614-0734

販売名: マイクロメガNiTiローターファイルシステム(One Recipro)  
販売名: マイクロメガNiTiローターファイルシステム (one Flare オリフィスオープナー)  
販売名: マイクロメガNiTiローターファイルシステム (One G グライドパス)  
販売名: マイクロメガNiTiローターファイルシステム (マイクロメガリムーバー)  
医療機器認証番号: 304AGBZI00001000



# MicroMega

ROOT CANAL SHAPING  
GuttaPercha REMOVAL

保険適用

## One RECI

ワンレシ

## One Flare

ワンフレア

## One G

ワンジー


## Remover

リムーバー



## 安全性を高めた断面形状※とMI-NiTiワイヤーのワンファイル・レシプロケーションシステム

※JOEvol48, No.1 Jan2022 "Apical Extruded Debris in Curved Canals"

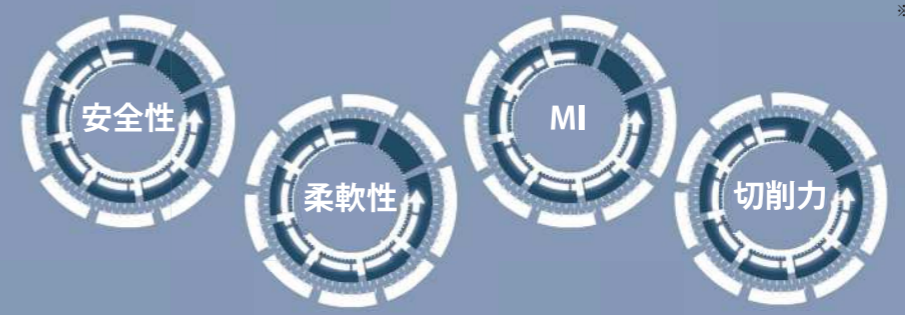



- #20/4%
  - #25/4%
  - #25/6%
  - #35/4%
  - #45/4%
- 各サイズ21mm / 25mm

# One RECI

ワンレシ  
レシプロケーション  
根管拡大・形成

レシプロケーション  
単回使用

STERILEEO 滅菌済み

C-Wire 熱処理NiTiワイヤー使用

MicroMega  
One RECI  
#25/6%

切削片の排出に  
優れたらせん形状※

イニシャルトリートメントに  
優れた1.0mmのMIワイヤ※※



ワンファイルシステム

滅菌済み包装




直径 **1.0mm** NiTiワイヤ使用  
歯頸部周囲および歯の硬組織の保存



弊社特許の左右非対称断面




熱処理NiTiワイヤ・システム

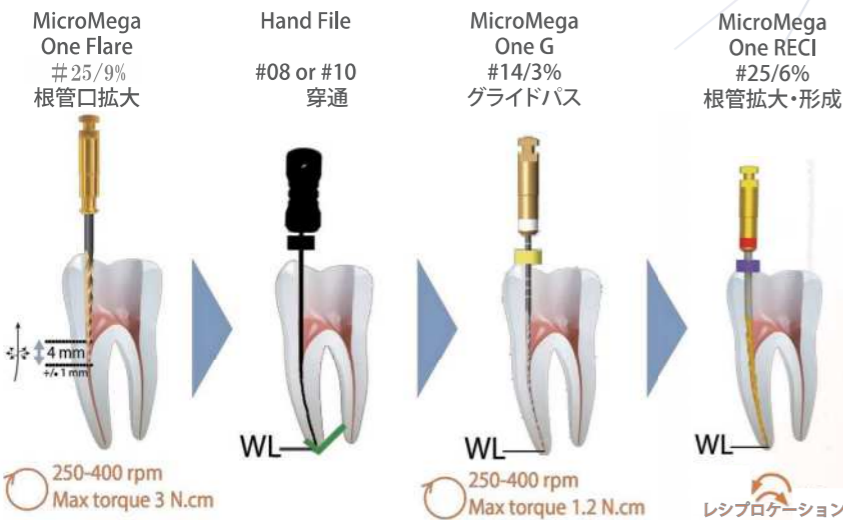


症例に応じて、One RECIのファイルサイズを選択してください。

歯頸部周囲および歯の硬組織の保存

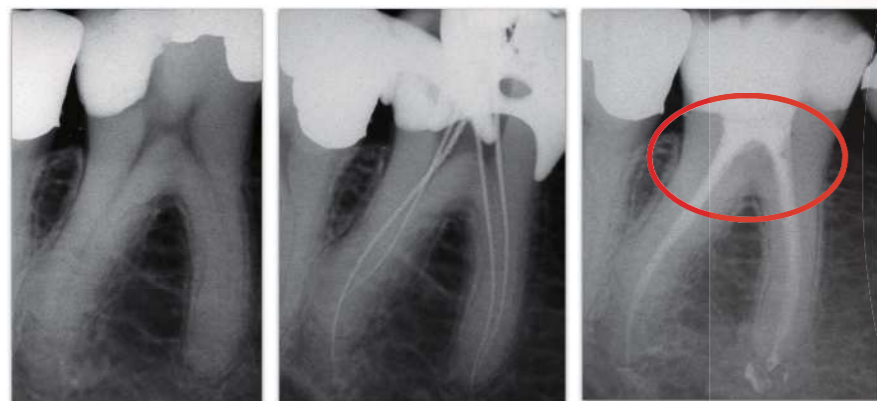

Dr. Filippo CARDINALLY - イタリア

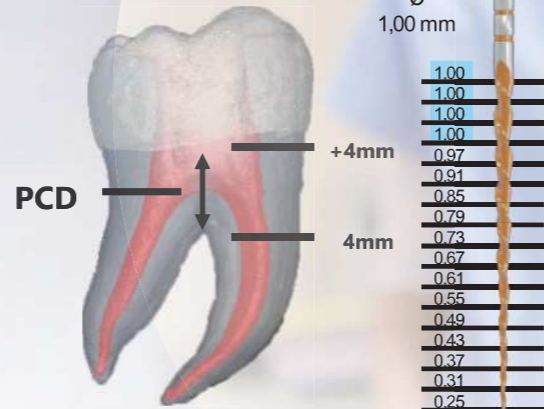

MicroMega  
One RECI  
#25/6%

# One Flare

ワンフレア  
根管口拡大



#25/9%  
17mm

正回転：250-400 rpm  
トルク：3.0 N.cm

STERILEEO 滅菌済み

T-Wire: 熱処理NiTiワイヤー使用

+50%  
柔軟性

従来自社製品  
One Flare

クロスセクション



# One G

ワンジー  
グライドパス

3つの刃先が歯根軸に対してそれぞれ異なる半径範囲に配置され、切削片の掻き上げと穿通効率を向上させます。

非切削先端



正回転：250-400 rpm  
トルク：1.2 N.cm  
単回使用

STERILEEO 滅菌済み

NiTiワイヤー使用



※MicroMega特許  
※One FlareとOne Gは1.2mmワイヤ使用