



新改良

吸引歯ブラシ

片手で吸引と口腔清掃ができる歯ブラシです。

安全で効率的な口腔ケアを。
操作性にこだわりリニューアル!!

改良
ポイント
①

吸引のオン・オフを
スイッチで切替できて
持ちやすい!



改良
ポイント
②

吸引チューブに
しっかりフィットする
形状なので抜けにくく
操作性アップ!




特長

片手で吸引と清掃が スムーズにおこなえます!!

① スイッチで吸引 オン・オフ簡単切替

新改良

スイッチで吸引のオン・オフが切替えられるので
指の位置が固定されず、操作しやすいです。

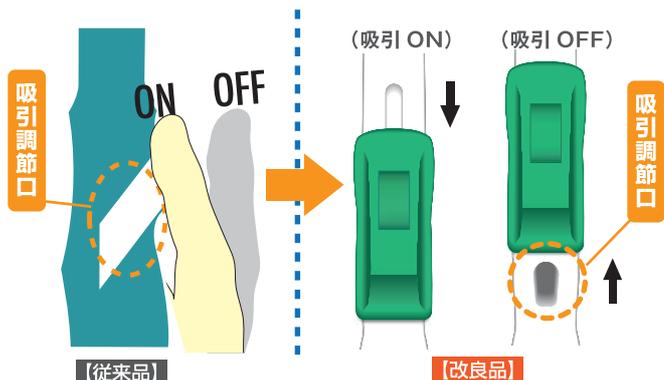

③ しっかり磨けるやわらかブラシ

粘膜を傷つけにくく清掃力のある歯ブラシを
採用しています。

品目	粘膜へのやさしさ (粘膜損傷試験)	清掃効果 (清掃試験)
マウスピュア。吸引歯ブラシ	◎	○
一般的な歯ブラシ やわらかめ	△	△
一般的な歯ブラシ ふつう	△	◎
一般的な歯ブラシ かため	×	◎

(当社調べ)


④ 吸引物がよく見える

柄が半透明なので、
吸引物の確認が可能です。



② 清掃しながらしっかり吸引

先端部と清掃面の両方
に吸引口があるので、
口の奥にたまった
水分も清掃した汚れも
吸引しやすいです。

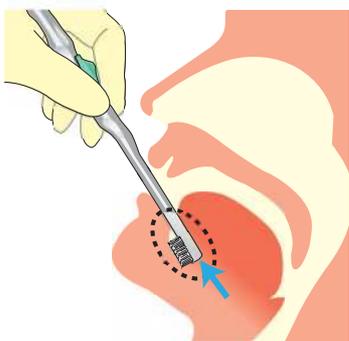

⑤ チューブからはずれ にくく使いやすい

新改良

吸引チューブにしっかりフィットする
波型形状なので抜けにくく、
操作しやすいです。



コードNo.	品名	希望小売価格 (税別)	ケース入数	高さ×幅×奥行き(単位mm)		重量	JANコード ITFコード
				個装	約		4
039-102090-00	マウスピュア。 吸引歯ブラシ 1本入	オープン	20袋/箱×12箱	245×84×15	約 12.7g	4	987601 479717 14987601479714
				250×120×90	約 294g		
				275×395×395	約 4.3kg		

※ 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

川本産業株式会社

● お客様相談窓口 ☎ 06-6943-8956 (10:00~17:00月~金ただし祝祭日を除く)
http://www.kawamoto-sangyo.co.jp

メディカル営業本部 札幌 011(374)8846 仙台 022(771)8681 埼玉 0480(67)2240
 東京 03(6666)6134 横浜 045(949)5520 名古屋 052(522)3371
 京都 075(662)2601 南大阪 0725(22)1443 神戸 078(841)8655
 広島 082(222)3501 高松 087(869)8530 福岡 092(475)1381

コンシューマ営業本部
 【コンシューマ販売部】 仙台 022(771)8681 東京 03(6666)6146 名古屋 052(522)3371
 堺 072(224)7806 広島 082(222)3501 福岡 092(475)1381

【商事販売部】 東京 03(6666)6147 堺 072(224)7800

●ご注文・お問い合わせは