

## ● シンプロ内容

シンプロ本体  
+  
シンプロ用ピーカー

クリーニングピン

ニコクリーン  
洗浄用カップ

ピンセット

マグネット

●製品仕様	
出力	100 - 240 V, 50/60 Hz
消費電力	90 VA
回転数	1200RPM 1600RPM 2000RPM
寸法(WxDxH)	140 x 300 x 230 mm
重量	約3 kg

**シンプロ**  
注文No. 6500-1000  
価格 210,000円  
※本体は3年保証です(洗浄槽は除く)。

シンプロ本体/シンプロ用ピーカー(洗浄槽・フタ付)/  
ニコクリーン洗浄用カップ(フタ付)/クリーニングピン(75g)/  
ピンセット/マグネット/電源ケーブル/取扱説明書

## ● 別売品

### 専用洗浄液

**シーメスDC**  
2L×1本

価格 5,000円

シンプロ専用洗浄液  
です。  
1回の洗浄で200mL  
必要です。



**ヘルペックス  
ディスカラーF**

1L×1本

注文No. 6700-0200

価格 4,800円  
義歯の着色を落とす洗浄剤  
です。シンプロでブラーク  
を除去した後、カップに  
浸漬して使用します。  
浸漬洗浄で5~10分  
シンプロでは使用しないで  
ください。



[成分]

[成分]

水、有機酸、無機酸、非イオン界面活性剤、その他

アミノエタノール、水酸化カルウム、グリコールエーテル、  
その他

### ●シンプロ用ディスインフェクタ ブルピーカー

注文No. 6500-0450  
価格 9,000円

### ●プラスチックカップ (フタ付)

注文No. 1850-0007  
価格 3,000円

### ●クリーニングピン (75g)

注文No. 6500-0550  
価格 13,000円

### ●マグネット

注文No. 90003-4039  
価格 7,700円

### ●ピンセット

注文No. 90003-4029  
価格 4,000円

**注意** ●本製品には強力な磁力を持つマグネットが含まれます。●ペースメーカーをご使用の方がいらっしゃる場合、本製品を50cm以上離してご利用ください。●本製品の周囲にパソコン等の記憶媒体、クレジットカード、時計を置かないでください。●特殊形状や素材(クラウンの薄いマージン部、メッキ部分、フリクションピンなど)は洗浄中に破損するおそれがあります。そうした箇所の損傷を防ぐために、あらかじめワックスやシリコンなどで保護してください。●本製品は義歯および歯列矯正用スプリント専用の洗浄機器です。なお、殺菌機能は備わっておりません。

## ● 関連製品

ザ・デンチャーズ  
**The Dentures®**

### 義歯ブラシ

握りやすいハンドル形状のため、  
使いやすく簡単に磨くことができます。  
2種類のナイロン毛  
(透明・茶色)があり、  
汚れにあわせて使い分けできます。

〈仕様〉ハンドル:ポリプロピレン製  
毛:ナイロン  
耐熱温度:80℃

価格:2,400円[ディスプレイ包装・6本入]  
参考患者価格:500円(税別)[1本]



ブラシ付き高級入れ歯ケース

**ここに  
入れ歯**  
Portable Denture

【特長】

- 義歯洗浄剤での洗浄、保管に最適です。
- ゴムパッキンを採用して密閉性を高めました。
- 軽くて頑丈、旅行などの携帯にも大変便利です。
- フタの内側には鏡が付いています。
- 持ちやすい専用ブラシが付いています。
- ワンタッチでフタをロックできます。

価格:900円



**販売終了**

製品についての詳細は  
弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.dentalsupply.co.jp/>



※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。



販売元  
**株式会社 日本歯科商社**

東京本社:〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店:〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所:〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所:〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は



Professional Care  
プロフェッショナルケア

全自動義歯洗浄器  
**SYMPRO**  
シンプロ



シンプロは35°に傾いた洗浄槽と  
クリーニングピンおよび専用洗浄液で  
頑固に付着した歯石やプラークを  
機械的、化学的に除去し洗浄します。

# 确实

優れた洗浄効果  
斜めドラム式とクリーニングピン


## ●35°斜めドラム式洗浄槽

家庭用洗濯機で採用されているように、斜めドラム式洗浄槽のものが、より洗浄効果がある事が知られています。また、実験により、35°の角度では、ピンが最も効率的に液体の中を動き回ることがわかりました。また、30秒ごとの反転機能により、洗浄槽内を義歯が反転移動するので、歯間などの狭小部分も確実に洗浄ができます。



## ●スチール製クリーニングピン

90°にカットされた均一な形状の薄型ピンで、面取り加工されており、義歯にキズをつけません。ピンが回転することで、洗浄液の温度が約45°Cに温められ、さらに洗浄効果を高めます。

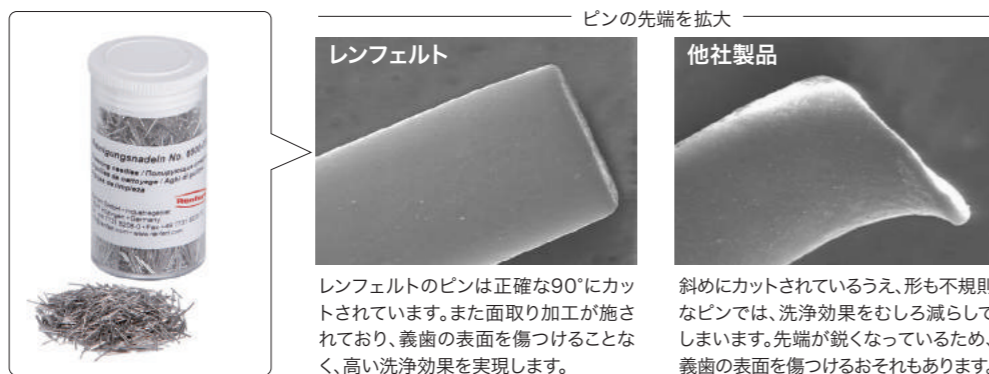

# 簡単

誰でも簡単操作  
セットして  
スタートキーを押すだけ

- 回転数と用途の目安
- 1200RPM:部分床義歯やデリケートな部位
  - 1600RPM:貴金属を使用した義歯や矯正装置
  - 2000RPM:総義歯、金属床やスプリント

## ●操作手順



# 清潔

口腔環境の改善  
患者さんの満足度アップ

## ●洗浄例



# Q&A

- Q 一度に何床洗浄できますか?**  
A ひとりの患者の上下顎2床までです。別々の患者の義歯と一緒に洗浄することは、感染予防の点から毎回新しい洗浄液を使用してください。

**Q デリケートな箇所などが洗浄中に破損するおそれがありますか?**  
A コーヌスやアタッチメント等特殊な部分は、あらかじめワックスやシリコン等で保護してください。

**Q 標準の洗浄時間は何分ですか?**  
A 約20分ですが、洗浄時間は洗浄する義歯の素材や汚れ具合によって変化します。何度か洗浄を行い、その都度汚れの落ち具合をチェックしてください。回数を重ねるうちに、適切な洗浄時間の判断が可能になります。

**Q 裏装材付の義歯は洗浄できますか?**  
A 洗浄できます。

**Q クリーニングピン・ピーカーおよびピーカーのフタの消毒方法**  
A 感染症の疑いがある患者の義歯を洗浄した場合は、殺菌消毒剤(グルタラル製剤)を使用してください。

**Q 洗浄液(ユニバーサル)の廃棄方法は?**  
A ピーカーの底部にマグネットを当て、大量の水道水でうすめながら廃棄してください。マグネットを当てませんと、クリーニングピンがピーカーから出てしまいます。