

歯科用高流動性硬質石こう

# ティーディー ハイフローストーン


## ■ 高い流動性

- TDハイフローストーンは高い流動性を有しています。そのため、気泡の混入を抑えてかつ、シリコンフォーマーへの注入が容易に行えます。



## ■ 滑沢な表面性状


- TDハイフローストーンは、各種印象材に対し良好な適合性を示し、滑沢な面性状の模型が得られます。

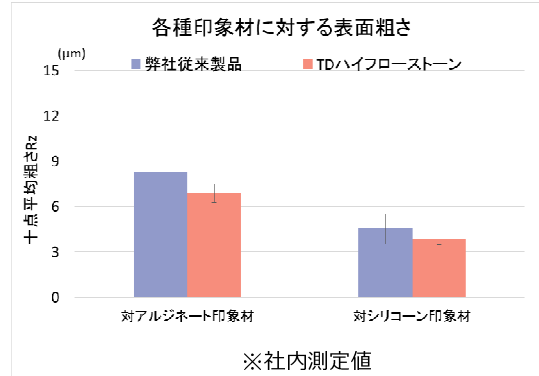

小さいほど滑沢

## ■ 優れた寸法精度

- TDハイフローストーンは従来の硬石こう製品と比較して低い硬化膨張率を示し、早期に膨張は安定化します。

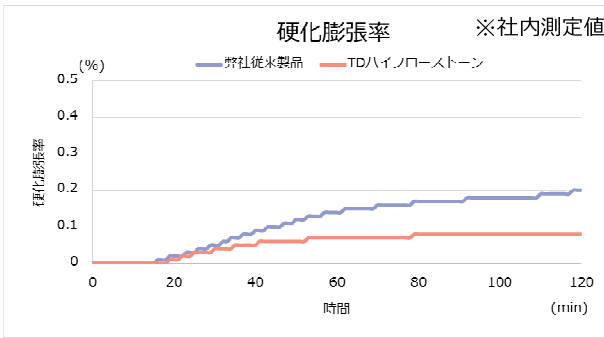

## TDハイフローストーン品目仕様

混水比 (W/P)	0.23
硬化時間	10分
硬化膨張 (120分後)	0.09%
圧縮強さ (60分後)	50MPa

## 使用用途



作業用模型の作製



基底模型の作製

## 【包装仕様】

3kg×6=18kg

価格 12,700円



【製造販売元】 大成歯科工業株式会社  
一般医療機器 歯科用硬石こう 届出番号: 27B2X00008000068



## 株式会社日本歯科商社

東京都墨田区石原1-19-5 TEL 03-3625-3111  
大阪市浪速区日本橋4-3-9 TEL 06-6643-0085  
札幌市北区北16条西5-3-18 TEL 011-716-7001  
福岡市博多区那珂4-16-22 TEL 092-436-2288

ご用命は