

ダウエルピン植立用穿孔器

トックスピンII

Top Spin

注文No. 1840-1000

- レーザー光により、正確な穿孔位置を確認できます。
- 最新のCAD/CAM同様のモーター、シャフトベアリングテクノロジーを採用しており、軸ブレが0.01mm以下の正確な穿孔が可能です。
- モーターの改良により、穿孔中のモーター抵抗が軽減されスムーズな作業ができます。

Renfert

ドイツ・レンフェルト社





ブレの少ない正確な穿孔



ワンタッチで外せるモーターカバー




軽くタッチするだけのセンサースイッチ

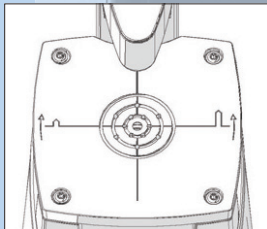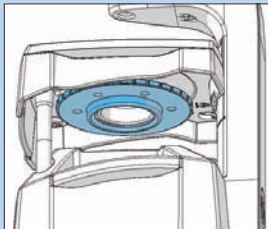

テーブル下のストッパーを回転させることにより、0.1mm単位で穿孔深さを調節できます。(ワンクリック: 0.1mm)



一目で収納量が見える半透明のダストコレクターは取り外しも容易です。

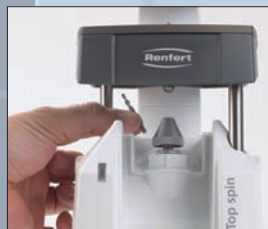

専用のツールを使わずに、本体下部の台座の向きを変えることで、ドリルの交換が可能です。座位の作業に適した角度に変更できます。



【仕様】 ●電源・電圧: 100-240V 50Hz/60Hz ●消費電力: 12W(穿孔時)、0.7W(待機時) ●回転数: 8,000min⁻¹
●外形寸法: 153(幅)×175(奥行)×330(高さ)mm ●重量: 4.0kg ●ドリルシャフト径: 3mm

価格: 270,000円 本体1台、トックスピン用ドリル φ2.02mm 1本

【別売】 トックスピン用ドリル φ2.02mm 1本 5010-0202
トックスピン用ドリル φ2.00mm 1本 5010-0200(トックスピン 1835-4000用)
トックスピン用ドリル φ1.98mm 1本 5010-0198
価格: 各8,800円
スマートピン用ドリル φ1.59mm 3本 367-0159
価格: 15,000円

製品についての詳細は弊社ホームページをご覧ください。



<http://www.dentalsupply.co.jp/>

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれません)。



JAPAN DENTAL SUPPLY

販売元

株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪本社: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は

0424TN0300