

もっとスマートな  
口腔内撮影へ

クリアファイバー

# スマート pix<sup>®</sup>

[ 口腔内撮影用LEDライト ]



スマートフォン装着時

タブレット装着時

特殊技術  
太陽光LED  
を採用

iPhone  
iPad<sup>(mini含む)</sup>  
対応!

- ◆ 太陽光に近いLEDスペクトル
- ◆ 選べる3種の発光パターン
- ◆ 撮影後すぐに患者説明ができる
- ◆ 軽量設計 約140g

※Apple製品以外のスマートフォンやタブレットにも使用可能です。  
ただし形状によっては取り付けができない場合もありますので  
詳しくは弊社担当までご相談ください。  
※本製品にスマートフォンやタブレットは付属していません。

## 開発者のおすすめポイント



開発者

メディカルフォトグラファー  
原田 崇 氏

1999年～2016年 愛知学院大学歯学部  
マルチメディアセンター(写真室) 勤務  
臨床写真撮影全般・OPE 動画撮影、顕微鏡撮影、印刷業務に従事

### Point 1

屋外真昼の自然光のような再現性  
で、診療の精度が上がるのが期待  
できます。

### Point 2

スマホだけでなく、治療説明などで  
よく利用しているタブレット端末  
も使用可能です。

製品説明動画QRコード



## 保険点数

### 歯周病患者画像活用指導料

- 歯周病患者画像活用指導料…………… 10点  
(口腔内写真の撮影、指導)
- 1枚を増すことに…………… 10点  
(2枚目～5枚目まで)

### 歯冠補綴時色調採得検査

- 歯冠補綴時色調採得検査…………… 10点  
(1枚を上限とする)

## RELATED PRODUCT



歯科専用口腔内カメラ  
クリアファイバープロ VI  
・ミラーレス一眼  
・内蔵ストロボ光を均一に照射  
価格 580,000 円

規格写真  
撮影可能!

## 01 太陽光に近いLEDスペクトル

トヨタグループ 豊田合成株式会社のLEDを採用し、一般的な高演色LEDよりも太陽光に近いスペクトルを実現しました。


[LED発光スペクトル]

自然光のような明るさ



装着時

非装着時

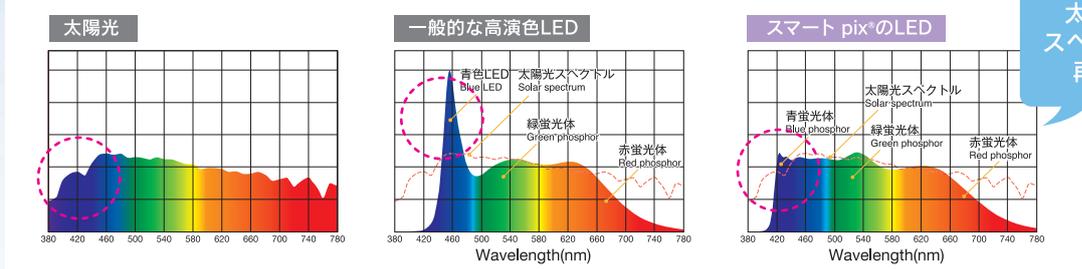

太陽光が発するスペクトルを忠実に再現しました。

## 02 撮影部位で選択できる3種類の発光パターン

前歯表面の形状や質感をしっかりと表現できる「左右発光」や「上下発光」、臼歯も含めた口腔内全体を明るく照射する「リング状発光」から選択することができます。

※ライトは電源ONで点灯し、シャッターと同時に光るフラッシュではありません。

左右発光パターン



前歯の内部構造などの確認に

上下発光パターン



前歯の表面ディテールなどの確認に

リング状発光パターン



口腔内全体の確認に

## 03 形状や質感を微細に表現する光の拡散性の最適化

特許出願中

豊田合成 LED

×

3種の発光パターン

×

光の拡散を考えた設計  
ケース形状&ディフューザー

により、ムラのない均一した光を照射することが可能です。



## 04 タブレットとの使用で撮影後すぐに患者説明が可能



## 05 片手でラクに持てる軽量設計

重量 約140g



往診などの持ち運びが容易です

## PRODUCT



口腔内撮影用LEDライト  
クリアファイバー スマート pix®

**仕様** 照度：4,900 ルクス ※対象物から15cmの場合  
調光：3段階  
LED数：8灯  
電源：単4電池×3本  
(エネループのご使用を推奨します)  
サイズ：W166×D120×H58 mm  
※スマホ用アーム装着時(出荷時)  
重量：約140g(電池重量含まず)

**価格** 125,000円

### 付属品

- ・六角レンチ
- ・ストラップ
- ・iPad mini用延長アーム
- ・iPad用延長アーム



・別売品 iPad13インチ用延長アーム 5,000円

製品についての詳細は  
弊社ホームページをご覧ください▼

<https://www.dentalsupply.co.jp/>



※iPhone、iPadはApple inc.の登録商標です。※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。※本製品の仕様は予告なく変更することがあります。※印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。

ジーシーグループ



[販売元]

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

[製造元]

株式会社 セルフメディカル

ご用命は