



精度への
こだわり!
使い勝手の
良さ!

歯科用硬石こう

ニューディーディーストーン

NEW TD STONE

使いやすさと安定した物性で快適な作業が行えます。

特長

- クリーミーな練和感があり、盛り付けが容易です。
- アルジネート、寒天印象材とのなじみが良く、滑沢な面が得られます。

基本物性

- 色調: パステルイエロー、ブルー、グレー
- 標準混水量(粉末100gに対して): 24mL
- 硬化時間: 11分
- 硬化膨張率: 0.25%
- 圧縮強度(1時間後): 49MPa

価格 17,000円
内容量 18kg (3kg×6)

一般的名称: 歯科用硬質石こう
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 27B2X00008000013



安定した強度
滑沢な
鋳造面

急速加熱型石膏系埋没材

ティーディークリスト 30


TD CRIST 30

練和開始から30分後に700℃に昇温した
リングファーンネスへ入れることができます。

特長

- 滑らかで流動性が良く、操作性に優れています。
- 低混水比(W28/PW=0.28)により、鋳型強度が大幅に向上。
亀裂やバリが発生しにくくなっています。
- 十分な操作余裕時間があり、1度の練和で複数のリングへの埋没が
可能です。
- 混水比を変えると、膨張量を調整でき適合を変えることができます。

基本物性

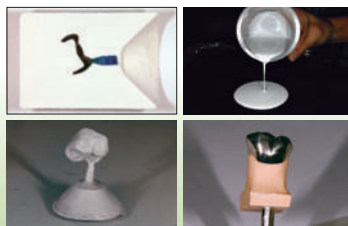

- 混水比(粉末100gに対して): 28mL
- 操作余裕時間: 8~10分
- 稠度: 133mm
- 硬化膨張率(2H後): 0.8%
- 熱膨張率(700℃): 1.3%
- 圧縮強さ(2H後): 4.6MPa

混水比	W28 / P100	W30 / P100
膨張量	標準	→ やや小さい
適合	標準	→ きつめ (FCK製作時)

価格 3,200円 内容量 3kg

一般的名称: 歯科鋳造用石こう系埋没材
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 27B2X00008000046

写真提供: 齊藤満也氏 (KIRINJI)



精度を
追求した
ろう着用
スタンド

ろう着用金属製スタンド


ティーディーソルダスタンド

TD SOLDER STAND

ポストを自由な位置に植立できますので、被ろう着用の
歯列にぴったり合わせて確実に固定できます。

特長

- ポスト位置を自由に設定できる設計。
- ろう着用埋没材との併用による、各種合金の熱膨張係数との調和。
- 陶材焼成用スタンドとしても使用可能。

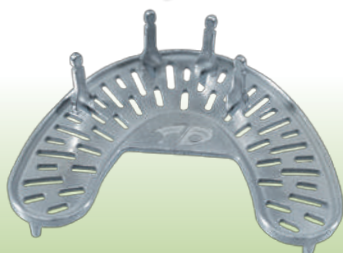

ティーディーソルダスタンドセット
価格 14,500円
(プレート1個、ポスト大・中・小 各3本)

ティーディーソルダスタンド用ポスト
ポスト大5本・中5本・小5本 各4,500円

楽な掘り出し
効率アップ



価格 11,000円
内容量 [粉末] 2.2kg (110g×20)

価格 2,200円
内容量 [専用液] 500mL

一般的名称: 歯科高温鑄造用埋没材
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 27B2X00008000052

急速加熱型リン酸塩系埋没材

ティーディーベストプレス

TD VEST PRESS

プレスセラミックス用埋没材です。

特長

- 優れたコストパフォーマンス!
- 操作余裕時間が5分と長く、複数のパターンを埋没する場合でも安心して作業を行えます。
- プレス後の強度が低く、掘り出しが容易に短時間で行えます。
- 流動性が高く、埋没時の気泡を巻き込みにくい設計です。
- 専用液の希釈率により、膨張率の調整(1.6~2.2%)が可能です。
- 急速加熱に対応しているため、短時間での補綴物作成が可能です。



基本物性

- 混液比: 粉末/液=110/25(標準粉液比 0.23)
- 流動性: 135mm
- 総膨張率: 2.2%(原液)/1.6%(50%希釈液)
- 圧縮強度: 24MPa(850°C)/13MPa(冷却後)

ローコスト
ハイ
パフォーマンス



価格 10,000円
240本入 (460g)

一般的名称: 歯科用キャスト用ワックス
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 27B2X00008000045

ティーディーインレーワックス

TD INLAY WAX

インレー・クラウン・ブリッジのロウ型作製用ワックスです。

特長

- 適度な弾性と切削感によりスムーズに作業を行えます。
- 凝固収縮が小さいので精度の良いワックスパターンが得られます。
- さまざまな用途で使用できるキャスト用ワックスです。

基本物性

- 色調: グリーン
- 凝固温度: 59.8°C
- 熱膨張率: 30°C/0.09%



写真提供:
斉藤満也氏
(KIRINJI)

アルギン酸塩印象材(ペーストタイプ)

アルヂックス ペースト

ALGIX PASTE

価格5kg 8,700円



特長

- ペーストがゲル化するとピンク色から白色へ変色するため、撤去タイミングがわかりやすくなっています。
- 普通石こう粉末と練和して使用するので、水が不要です。

一般的名称: 歯科用アルギン酸塩印象材
医療機器分類: 管理医療機器
認証番号: 219AABZX00128000

支台歯模型用スペーサー

ティーディー フィットスペーサー

塗って剥がせる
スペーサー

TD FITSPACER

水溶性のダイスペーサーです。
ひと塊りで剥がすことができます。

基本物性

- 被膜厚さ: 10μ
- 乾燥時間: 室温放置 約10分、
ドライヤー乾燥 約3分
- 色調: ホワイト

価格 1,000円
10mL



※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.dentalsupply.co.jp/>



販売元

株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

製造販売元 大成歯科工業株式会社

ご用命は