

AUSTROMAT 624i

oral design

[オストロマト624i オーラルデザイン]

oral design

さらなる
審美性を表現。
デケマクオリティが

インターネットアクセス

デケマ社のデータベースから各メーカーの焼成プログラムを選択できます。

独自のマッフル素材を採用

保温効率に優れた特殊ストーンをマッフルと焼成台に採用し、陶材をより緻密に焼き上げることが可能です。


オートドライシステム

焼成前の乾燥から焼成後の冷却まで、マッフル内の温度と焼成台の距離を計算し焼成台上の補綴物の温度を正確にコントロールします。


10.4型の高解像度ディスプレイ

パッド操作やマルチタッチ操作に対応した大型ディスプレイを採用しました。また、焼成台の上下はソフトタッチで可能となりました。

001249 17/03/02 01:24:12
ogram

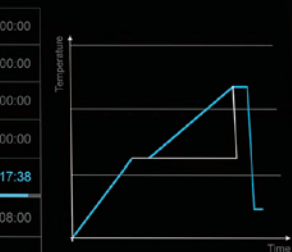

Delete Setup ESC

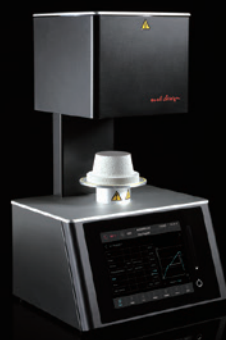

歯科技工用ポーセレン焼成炉 オストロマト624i oral design

価格 2,300,000円

包装 本体1台

パキュームポンプ1台、エアフィルター1個、焼成台1個、温度キャリブレーションキット1個、ピンセット1本

仕様

| | |
|----------------|-------------------------------|
| 最高焼成温度 | 1,200℃ |
| インターフェース | USB×2、LAN×1 |
| プログラムモード | イーザーモード/クラシックモード/プロフェッショナルモード |
| 本体サイズ(幅×奥行×高さ) | 383×343×653mm |
| 本体重量 | 19.0kg |
| 電源 | 100V(50Hz/60Hz) |
| 消費電力 | 1,450W |

■ 一般的名称: 歯科技工用ポーセレン焼成炉 ■ 医療機器分類: 一般医療機器 ■ 届出番号: 13B2X10104190337

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください

<http://www.dentalsupply.co.jp/>



ジーシーグループ [製造販売元]



JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は