



3Dプリンター専用急速加熱型リン酸塩系埋没材

ティーディー ベスト スリーディー TD VEST 3D


急速加熱に対応した
3Dプリンター用リン酸塩系埋没材。
操作性も高く、滑沢な鑄造面を実現します。

※3Dプリンター樹脂以外の一般歯科材料の埋没にも適用いたします。

FEATURES

通気性の向上により、 急速加熱が可能

新規結合補助材により、3Dプリントパターン
燃焼時のガス抜けが良くなりました。
急速加熱が可能となり、短時間で滑沢な
鑄造面を得ることができます。

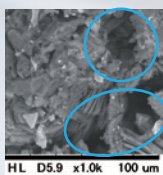


粒子間の隙間が大きく、
通気性の高さを実現



滑沢な鑄造面

余裕の操作時間で 高い操作性を実現

ゆとりのある操作時間で、さらに流動性も良く、
優れた作業性を実現します。

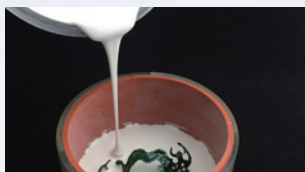

混液比の調節で 安定した適合精度を獲得

混液比を調節することで膨張率を調整し、適合のコントロール
が可能。テクニシャンの思い通りの安定した適合精度を得る
ことができます。



3Dプリンター専用
急速加熱型リン酸塩系埋没材

ティーディー ベスト スリーディー

価格

粉末 10kg…………… 15,000円
(400g×25包装)

液体 1,000mL …… 3,200円

NEW 液体 2000mL …… 5,200円



〔液体 1,000mL〕



〔粉末 400g×25包装〕

製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください▶

<https://www.dentalsupply.co.jp/>



■ 一般的名称: 歯科高温鑄造用埋没材 ■ 医療機器分類: 一般医療機器 ■ 届出番号: 27B2X00008000071

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ [販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社:〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店:〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所:〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所:〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

[製造元]

大成歯科工業株式会社 大阪府交野市星田北4-38-7

ご用命は